

Κάρτα εξαρτημάτων για την AirFit P10





Κεφαλοδέτης με
ιμάντα διαχωρισμού
AirFit P10
62935

Κεφαλοδέτης με
ιμάντα διαχωρισμού
AirFit P10 for Her
62936 (μικρότερο μέγεθος)



Σύστημα πλαισίου
περιλαμβάνει στάνταρ
πλαίσιο και επιλογή
μεγέθους μαξιλαριού
62920 (XS)
62921 (S)
62922 (M)
62923 (L)

Πλαίσιο μόνο
62938

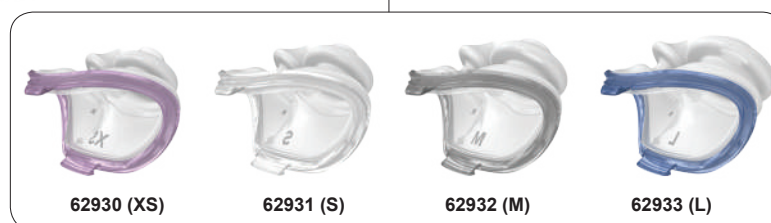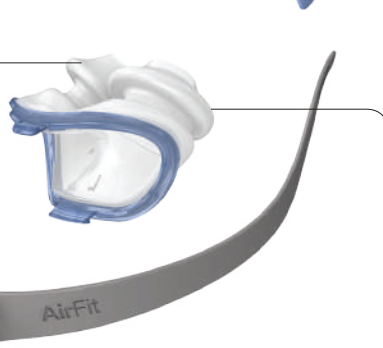

62930 (XS)

62931 (S)

62932 (M)

62933 (L)

Μαξιλαράκια

XS Πολύ μικρό μέγεθος
S Μικρό μέγεθος
M Μεσαίο μέγεθος
L Μεγάλο μέγεθος

Σημείωση: Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο
χρήστη AirFit P10.

Κωδικοί προϊόντων

	Ευρώπη 1	Ευρώπη 2	Ευρώπη 3
AirFit P10 - πλήρες σύστημα*	62901	62902	62903
AirFit P10 for Her - πλήρες σύστημα**	62911	62912	62913

* Η μάσκα παρέχεται συσκευασμένη με μαξιλαράκια μεγέθους S, M και L.
** Η μάσκα παρέχεται συσκευασμένη με μαξιλαράκια μεγέθους XS, S και M.

Ευρώπη 1: Αγγλικά (HB), Γαλλικά, Γερμανικά και Ιταλικά (Ελβετία)

Ευρώπη 2: Αγγλικά, Δανέζικα, Φινλανδικά, Νορβηγικά και Σουηδικά

Ευρώπη 3: Αγγλικά, Τσέχικα, Ολλανδικά (Βέλγιο), Γαλλικά (Βέλγιο), Γερμανικά (Βέλγιο), Ελληνικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Πολωνικά, LMSXS Πορτογαλικά, Ρωσικά, Σλοβενικά, Ισπανικά και Τουρκικά

1 Κλινική μελέτη FECS3 της ResMed. Το 90% των συμμετεχόντων τοποθέτησε τη μάσκα άνετα σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα.

2 Δηλωμένες τιμές με δύο αριθμούς για την εκπομπή θορύβου (με αβεβαιότητα 3dBA) κατά ISO 4871.

3 Κλινική μελέτη FECS3 της ResMed. Αντικειμενικά δεδομένα της ResMed (πίεση, διαρροή, μέση ημερήσια χρήση, AHI) που συλλέχθηκαν από μέγεθος δείγματος 21 συμμετεχόντων.



ResMed Ltd
1 Elizabeth Macarthur Drive,
Bella Vista, NSW 2153 Αυστραλία

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ:
[EC REP] ResMed (UK) Ltd, 96 Jubilee Avenue,
Milton Park, Abingdon, Oxfordshire, OX14 4RW HB

Τα AirFit, QuickFit, QuietAir και Swift είναι εμπορικά σήματα της ResMed Ltd. Το Swift είναι καταχωρημένο στο Γραφείο Ευρεσιτεχνιών και Εμπορικών Σημάτων των Η.Π.Α. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς ειδοποίηση. © 2013 ResMed Ltd. 1016929/1 2013-11





Μια πιο αθόρυβη μάσκα για να ταιριάζει με τον ύπνο σας.

Η μάσκα με ρινικά μαξιλαράκια AirFit P10 έχει κατασκευαστεί με βάση την αποδεδειγμένη απόδοση, άνεση και αξιοπιστία της μάσκας Swift™ FX, αλλά είναι 50% πιο αθόρυβη και περίπου 50% πιο ελαφριά. Η AirFit P10 είναι απλή στη χρήση, διαθέτει κεφαλοδέτη QuickFit™, καθώς και προηγμένο εξαερισμό QuietAir™ που σχεδόν δεν ακούγεται. Κάντε την, πρώτη σας επιλογή στα ρινικά μαξιλαράκια.

Οφέλη για εσάς ...

Αυτορυθμιζόμενος κεφαλοδέτης

Ο ελαστικός κεφαλοδέτης QuickFit που διαθέτει ρυθμίζεται αυτόματα στο κεφάλι του κάθε ασθενή. Μπορεί να τοποθετηθεί σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα.¹

Βελτιωμένη χρηστικότητα

Αποτελείται μόνο από τρία μέρη (πλαίσιο, μαξιλαράκι και κεφαλοδέτης) και έτσι είναι εύκολο να γίνει επίδειξή του, καθώς και αποσυναρμολόγησή του για καθαρισμό.

Ενθαρρύνει τη συνεχιζόμενη θεραπεία

Η AirFit P10 είναι σχεδιασμένη να βοηθάει τους χρήστες να δεχθούν και να συνεχίσουν τη θεραπεία, ενθαρρύνοντας τη συμμόρφωση του ασθενή.

Απλός οδηγός μεγεθών και εύκολη διαφοροποίηση για τα μαξιλαράκια

Η AirFit P10 βασίζεται στην πλατφόρμα της μάσκας Swift FX, έτσι προσφέρει στους τρέχοντες χρήστες του Swift FX τον ίδιο οδηγό μεγεθών για τα μαξιλαράκια. Επιπλέον τα μεγέθη για τα μαξιλαράκια διαθέτουν χρωματική κωδικοποίηση για εύκολη αναγνώριση.

... και για τους ασθενείς σας

Ελκυστική εμφάνιση

Με σχεδιασμό ανοικτού προσώπου και μικρό βάρος (45 g) η AirFit P10 προσφέρει μεγάλο βαθμό ελευθερίας προσώπου.

Εύκολη αποδοχή της θεραπείας

Δεν είναι τρομακτική ή κλειστοφοβική όταν φοριέται, ενθαρρύνοντας τους ασθενείς αρχικά να δεχθούν τη θεραπεία και μετά να τη συνεχίσουν.

Σχεδόν μη αντιληπτός εκπνεόμενος αέρας

Η υψηλά αποτελεσματική διάχυση του αέρα προσφέρει εξαιρετική εμπειρία χρήστη για τους ασθενείς και τους συντρόφους τους.

Εξαιρετικά αθόρυβη απόδοση μάσκας

Το καινοτόμο άνοιγμα εξαερισμού από υφασμένο πλέγμα του AirFit P10 το καθιστά την πιο αθόρυβη μάσκα της ResMed με στάθμη έντασης ήχου μόλις 21,4 dBA.²

Άνεση με σταθερότητα.

Μια πρόσφατη κλινική μελέτη³ έδειξε ότι πάνω από το 70% των ασθενών προτιμούσαν τη νέα AirFit P10 σε σχέση με τη δημοφιλή μάσκα Swift FX σε ό,τι αφορά την άνεση και τη σταθερότητα. Κατά μέσο όρο, οι συμμετέχοντες επίσης απόλαυσαν 42 λεπτά περισσότερο ύπνο κάθε βράδυ³ χρησιμοποιώντας την AirFit P10 σε σύγκριση με τη Swift FX.

Η μάσκα με ρινικά μαξιλάρια AirFit P10 παρέχει σταθερή εφαρμογή και υψηλού επιπέδου άνεση με εξαιρετική χρηστικότητα. Επίσης προσφέρει στους ασθενείς μια πραγματική αίσθηση ελευθερίας προσώπου.

Ο καινοτόμος νάιλον κεφαλοδέτης με πλέξιμο στημονιού QuickFit της μάσκας είναι διακριτικός αλλά ταυτόχρονα παρέχει άνετη στήριξη του κεφαλιού σε δύο σημεία με ελάχιστη επαφή με το πρόσωπο, και είναι σχεδιασμένος να ενθαρρύνει την εύκολη αποδοχή από τον ασθενή.



Εύκαμπτα μαξιλάρια με δράση τραμπολίνου που διευκολύνει την κίνηση προς πολλές κατευθύνσεις ενώ διατηρείται η εφαρμογή.

Ρινικά μαξιλάρια διπλού τοιχώματος εφαρμόζουν κατά την επαφή, διανέμουν απαλά τον αέρα στη μύτη και παρέχουν μεγάλο εύρος εφαρμογής.

Οδηγός μεγεθών με χρωματική κωδικοποίηση με κάθε μέγεθος να αντιστοιχεί σε διαφορετικό χρώμα για εύκολη αναγνώριση: Ροζ (XS), Διαφανές (S), Γκρι (M), Μπλε (L).


XS S M L

Απλότητα τριών μερών
Η AirFit P10 αποτελείται μόνο από τρία μέρη για γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση.

Ελαφρύς ενσωματωμένος ευέλικτος σωλήνας που τεντώνει και λυγίζει παρέχοντας ευελιξία σε συνδυασμό με σταθερότητα, για να μπορεί ο ασθενής να κοιμάται σε μεγάλο εύρος στάσεων ύπνου.

Αυτορυθμιζόμενος κεφαλοδέτης QuickFit με τεχνικό έλεγχο δύναμης και ανύσματος δύο σημείων έτσι ώστε το ελαστικό να σταθεροποιεί απαλά τη μάσκα και να τραβάει τα μαξιλάρια στη θέση τους. Διατίθεται σε κανονικό μέγεθος και σε ένα μικρότερο μέγεθος για την AirFit™ P10 for Her.

Εξαερισμός από υφασμένο πλέγμα QuietAir διαχέει απαλά τον εκπνεόμενο αέρα ώστε να μην γίνεται σχεδόν καθόλου αντιληπτός από τους ασθενείς ή τους συντρόφους τους. Η AirFit P10 είναι η πιο αθόρυβη μάσκα της ResMed στα 21,4 dBA.²

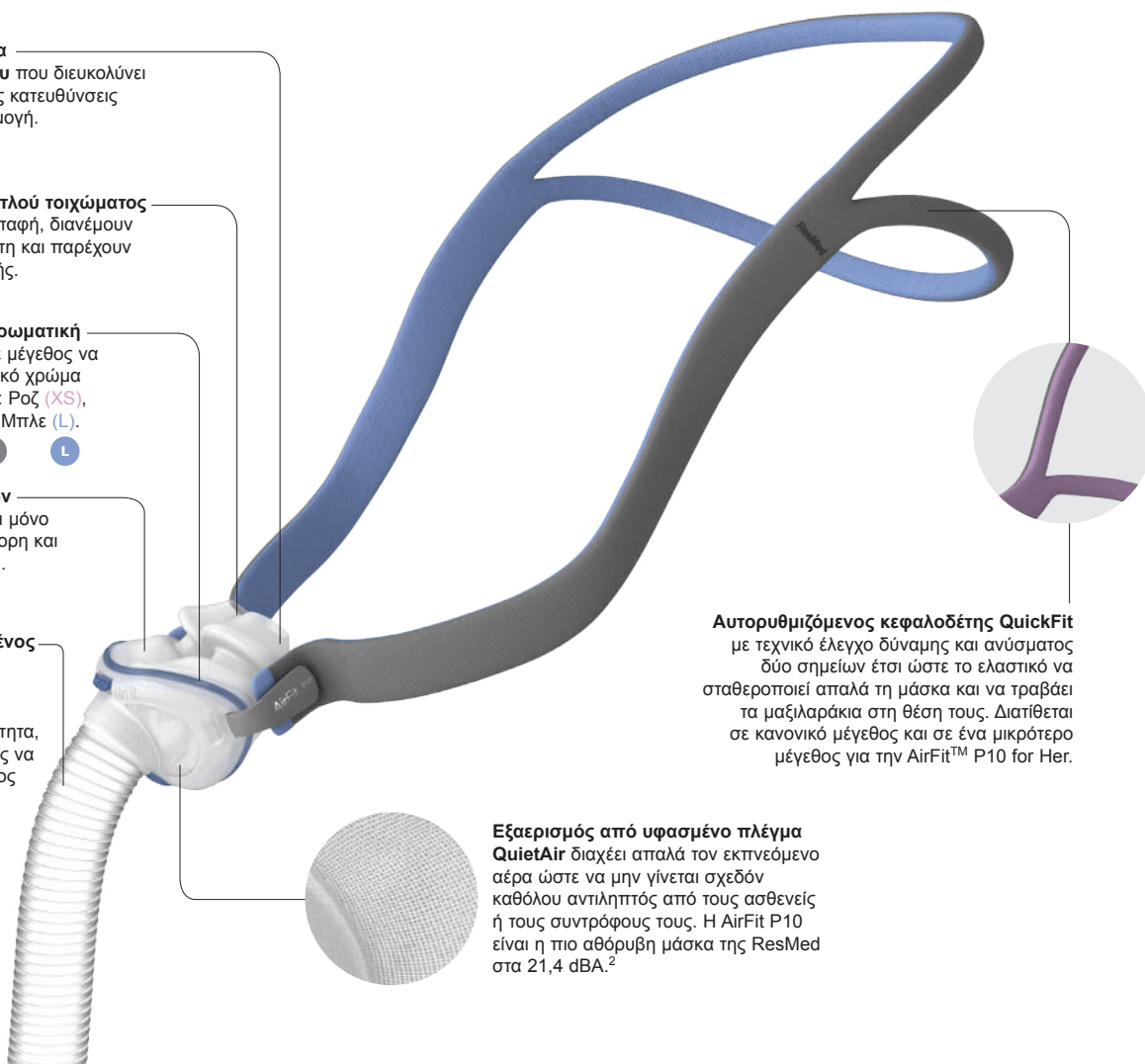

Οδηγός εφαρμογής για την AirFit P10




- Κρατήστε τα μαξιλαράκια στη μύτη σας και βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη μεγέθους για τα μαξιλαράκια βρίσκεται στο κάτω μέρος και ότι μπορείτε να δείτε την αριστερή (L) και δεξιά (R) ένδειξη προσανατολισμού.



- Τεντώστε τον κάτω ιμάντα γύρω από το πίσω μέρος του κεφαλιού σας.
- Ο πάνω ιμάντας πρέπει να είναι τοποθετημένος άνετα στο επάνω μέρος του κεφαλιού σας.



- Τραβήξτε τον κεφαλοδέτη πάνω από το κεφάλι σας κρατώντας τον κάτω ιμάντα.

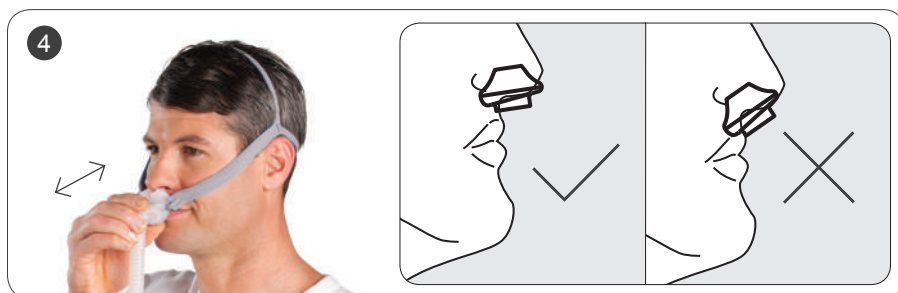

- Μετακινήστε τη μάσκα μακριά από το πρόσωπό σας και μετά τοποθετήστε την ξανά.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ρινικά μαξιλαράκια εφαρμόζουν με ασφάλεια μέσα στα ρουθούνια σας και είναι τοποθετημένα και τα δύο όρθια.



- Τέλος, συνδέστε το άκρο του σωλήνα της μάσκας μέσα στη σωλήνωση αέρα της συσκευής σας και κατόπιν ενεργοποιήστε τη συσκευή σας.
- Η μάσκα σας είναι τώρα έτοιμη για χρήση.



- Για την επίτευξη άνετης εφαρμογής, απλώς προσαρμόστε τον πάνω και κάτω ιμάντα τραβώντας τον κάθε ιμάντα μακριά από τον άλλον για να τους χαλαρώσετε και φέρνοντάς τους κοντά για να τους σφίξετε.

Σημείωση: Για πλήρεις οδηγίες χρήστη ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη AirFit P10.